

# SCOLPISCI IL CORPO E RICOMPATTA LA PELLE DEL VISO

CON IL

**MULTISISTEMA 3 IN 1**



CON  
**MANIPOLO  
ROLL**

Per il rimodellamento  
del corpo e il miglioramento  
della cellulite.

# T-SHAPE

 B-TECH LINE

# COMODO, EFFICACE, NON INVASIVO!



EFFETTO  
LIFTING



EFFETTO  
PUSH UP

La nuova generazione di trattamenti per il **rimodellamento dei contorni del corpo** e il **ricompattamento della cute del viso**.

Dai piccoli miglioramenti nelle aree problematiche, alle maggiori trasformazioni sull'intero corpo, possiamo aiutarti ad apparire al meglio.

T-SHAPE COMBINA  
**TRE DIVERSE TECNOLOGIE**  
CHE COMPREDONO:

- la Radiofrequenza multipolare,
- il Laser LLLT
- l'aspirazione Vacuum con vari impulsi dinamici.

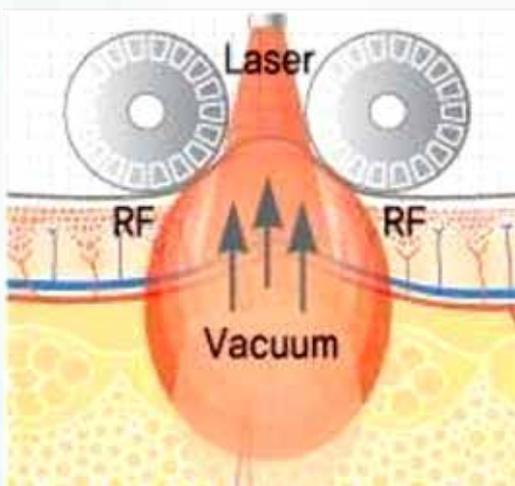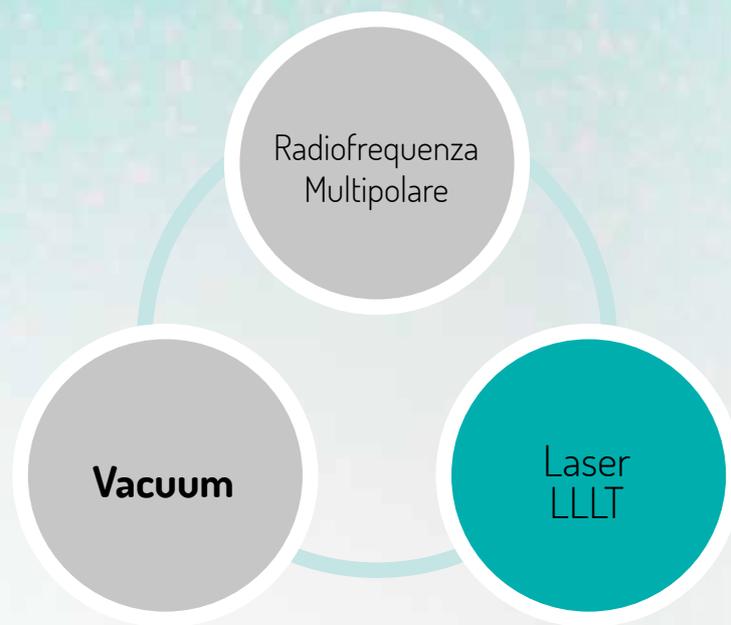

La combinazione di **RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE** e **LASER LLLT** crea un intenso calore termico nei tessuti connettivi, compreso il setto fibroso.

Questo, favorisce un aumento dei depositi di collagene e del metabolismo cellulare, determinando una considerevole riduzione localizzata del volume e della lassità cutanea.

La funzione concomitante dell'aspirazione **VACUUM** genera un immediato aumento della circolazione sanguigna e del drenaggio linfatico, entrambi essenziali per il miglioramento della salute generale.

# COME FUNZIONA T-SHAPE

1

## RF (RADIOFREQUENZA)

- T-Shape genera un segnale Radiofrequenza bipolare, quadripolare, esapolare.
- Dal contatto dell'energia RF (radiofrequenza) con l'impedenza tissutale, viene a generarsi il calore.
- Le fibre di collagene, presenti nel derma, riscaldate nel modo giusto si denaturano e conseguentemente si contraggono e si ispessiscono.
- In risposta al calore iniziale viene a prodursi una successiva formazione di nuovo collagene, con una pelle che appare più rassodata, compatta e giovane.



### RIFERIMENTO:

1. Fitzpatrick R, Geronemus R, Goldberg D, et al: Studio multicentrico sulla radiofrequenza non invasiva per il compattamento dei tessuti periorbitali. *Lasers Surg Med* 33:232-242, 2003

## 2

### ASPIRAZIONE VACUUM


- T-Shape vanta una tecnologia vacuum-assistita, associata a vari impulsi dinamici.
- Il Vacuum solleva, piega e comprime la cute per aumentare la circolazione sanguigna locale, e stimola il drenaggio linfatico.
- Facilita l'attività dei fibroblasti, e favorisce la vasodilatazione oltre a diffondere l'ossigeno.
- Permette una precisa distribuzione dell'energia.



## 3

### LASER LLLT

- Man mano che il Laser LLLT irradia il tessuto adiposo aiuta a formare micropori transitori negli adipociti, ed accelerando la frammentazione dei trigliceridi in glicerolo e acidi grassi, che possono fuoriuscire dalla cellula, che risulterà così ridotta di volume. I lipidi fuoriusciti, a loro volta, vengono eliminati attraverso le normali vie metaboliche.
- Risulta efficace, nella riduzione della misura della circonferenza di tutto il corpo, nelle zone trattate specificamente, ed ha dimostrato la riduzione di edemi.

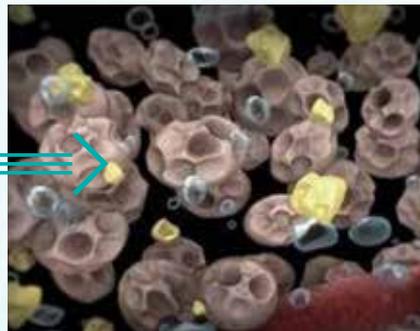

#### RIFERIMENTO:

Trattamenti di Modellamento del Corpo: Comparazione tra Laserlipolisi, Laser Terapia Non Invasiva con laser a basso livello e Metodo a Ultrasuoni eseguita dal Dr. Freeman M Sc. PhD. 12 maggio 2011.

# STRUTTURA PRINCIPALE

## PANNELLO DI CONTROLLO:

- L'intuitiva interfaccia con touch screen LCD con impostazioni predefinite da computer facilita il trattamento tanto ai neofiti, quanto ad utenti esperti.

## 3 DIVERSI TIPI, IN TOTALE 6 MANIPOLI:

- Manipolo Roll per il corpo
- Manipolo Multipolare per il corpo (n. 2) e il viso (n. 1)
- Manipolo Termico per il viso (n. 2)



## CASSETTO:

- Per conservare comodamente i vari manipoli in un unico luogo

## FILTRI:

- Consente di eliminare facilmente la crema in eccesso per mantenere pulito il macchinario

● MANIPOLI VISO



**MANIPOLO TERMALÉ**



Grande



Piccolo

**MANIPOLO MULTIPOLARE**



Piccolo


● MANIPOLI CORPO



**MANIPOLO MULTIPOLARE**



Grande

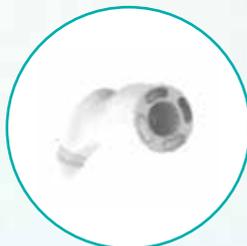

Medio

**MANIPOLO ROLL**



# I MANIPOLI T-SHAPE CORPO

## MANIPOLO ROLL

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per il rimodellamento del contorno del corpo e il miglioramento della cellulite.
- Il manipolo Roll motorizzato (vacuum) permette di attivare precisamente sia il Laser LLLT sia che modulare l'energia radio frequenza bipolare nei punti dove è possibile ottenere il massimo effetto.
- Facile da utilizzare.
- 4 tipi di impulsi dinamici. (M1, M2, M3, M4)

### TECNOLOGIA

- Radiofrequenza Bipolare.
- Aspirazione Vacuum.
- Trattamento con Laser LLLT.

### AREA TRATTABILE

- Schiena, addome, coscia.



M1, M2, M3, M4

## MANIPOLO MULTIPOLARE

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per lo snellimento del corpo e rilassamento muscolare.
- Utilizzo di 4 e più elettrodi per trasmettere la radiofrequenza al tessuto cutaneo
- Questo manipolo multipolare vuoto-assistito per il corpo, è in grado di riscaldare contemporaneamente gli strati cutanei superficiali e profondi, trasmettendo un'azione termica e uniforme alla cute .
- Facile da utilizzare.
- 4 tipi di impulsi dinamici.

### TECNOLOGIA

- Radiofrequenza Multipolare.
- Aspirazione Vacuum.
- LED rosso.

### AREA TRATTABILE

- Schiena, addome, coscia.



# I MANIPOLI T-SHAPE CORPO

## MANIPOLO MULTIPOLARE

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per linfo-drenaggio e rassodamento facciale.
- Utilizzo di 4 elettrodi per trasmettere la radiofrequenza al tessuto cutaneo. Questo manipolo multipolare vuoto-assistito per il viso è in grado di riscaldare contemporaneamente gli strati cutanei superficiali e profondi, trasmettendo corrente focalizzata e uniforme alla cute.
- Facile da utilizzare.
- 4 tipi di impulsi dinamici. (M1, M2, M3, M4)



M1, M2, M3, M4

- TECNOLOGIA**
- Radiofrequenza Quadripolare.
  - Aspirazione Vacuum.
  - LED rosso.

- AREA TRATTABILE**
- Fronte, guance, linea mascellare, collo.

## MANIPOLO TERMALE

### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Per il Lifting Facciale.
- Conduttività dell'energia termica aumentata, che riduce i tempi di trattamento, grazie alle estremità bipolari rivestite in ceramica.
- Disegno ergonomico ideato per coprire anche le aree sensibili e difficili da raggiungere come le aree periorali e periorbitali.
- Disponibili 2 testine, una grande e una piccola.




- TECNOLOGIA**
- Radiofrequenza Bipolare Capacitiva.

- AREA TRATTABILE**
- Grande: collo, fronte, guancia, linea mascellare.
  - Piccola: periorbitale, periorale.

# PANNELLO CONTROLLO T-SHAPE

## PANNELLO DI CONTROLLO

- Interfaccia intuitiva, intelligente e di facile impiego.
- Schermo touch screen a colori ad alta risoluzione con parametri preimpostati per risultati sicuri, costanti, affidabili ed effettivi.

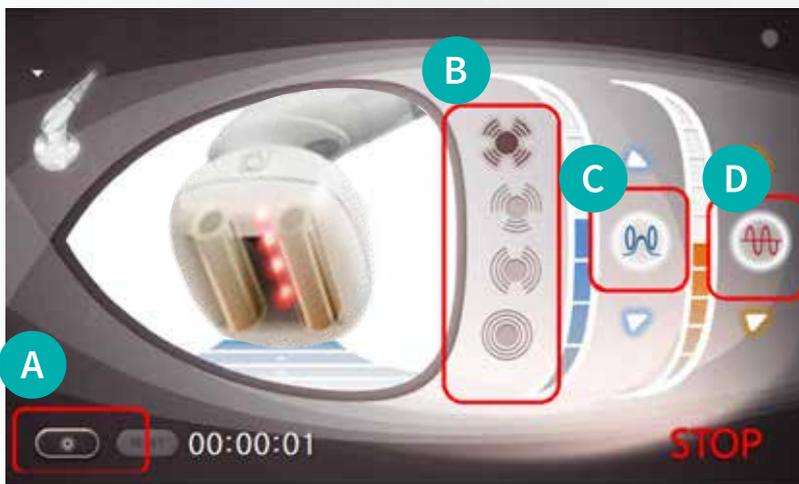

- A** LASER LLLT
- B** IMPULSI DINAMICI
- C** LIVELLO VACUUM
- D** LIVELLO RADIOFREQUENZA

Livello RF 10, Livello Aspirazione Vacuum 7, Modalità Impulso 4

## QUANDO E' INDICATO T-SHAPE

- Ricompattamento cutaneo
- Miglioramento della cellulite
- Riduzione dei pannicoli adiposi
- Riduzione della circonferenza
- Trattamento post liposuzione
- Lifting viso e compattamento della cute

## RISULTATI DI CASI SPECIFICI

### RISULTATI CASI SPECIFICI

Potenza comprovata, risultati eccezionali.

Osserva il potere trasformante dei trattamenti con T-Shape su un'ampia serie di corporature. Queste diverse impostazioni di trattamento, consentono di esercitare la potenza e la flessibilità necessarie per trattare quasi ogni cliente con risultati misurabili, immediati e duraturi.

#### A - Addome

Donna, 40 anni | Dopo 10 Sedute



PRIMA



DOPO

#### B - Fianchi

Donna, 40 anni | Dopo 10 Sedute



PRIMA



DOPO

#### C - Gambe

Donna, 40 anni | Dopo 10 Sedute



PRIMA



DOPO

## T-SHAPE I VANTAGGI

### T-SHAPE OFFRE TUTTI QUESTI VANTAGGI E TANTI ALTRI BENEFICI.

- Applicabile su un ampio gruppo di clienti per trattare varie tipologie di corporature e molteplici aree corporee, comprese quelle facciali.
- Versatilità nel trattamento di diverse aree adipose ostinate, e/o cute flaccida.
- Trattamenti semplici, veloci e comodi, alto livello di soddisfazione del cliente.
- Non invasivo, non chirurgico, non richiede anestesia. Trattamento praticamente indolore.
- Aiuta a ridurre il gonfiore postoperatorio, migliorando la circolazione sanguigna nell'area trattata.
- Facile da utilizzare.

## T-SHAPE IL PROTOCOLLO

### PROTOCOLLO DI UTILIZZO

- Tempistiche: il tempo medio richiesto per un trattamento con T-Shape, è di circa 30 minuti per area (viso e corpo).
- Esperienza: la maggior parte dei clienti si rilassa comodamente, durante l'esecuzione del trattamento.

### **Regime:**

I trattamenti sono in genere programmati secondo lo schema di 2 sessioni a settimana. La maggior parte dei clienti sosterrà 8 - 10 trattamenti per ottenere il risultato desiderato.

Facile da utilizzare.

## TECNICHE **SPECIFICHE**

Funzioni	Radiofrequenza multipolare Vacuum Laser bassa potenza Led Rosso
Alimentazione	CA 100~120V / 220~240V - 50/60 Hz
Display	10.2 " Digital Touch Screen
Peso e Dimensioni (WxDxH)	413 x 572 x 1,250 (mm) / 60 kg
Lunghezza onda emissione laser bassa potenza	760 nm
Classe laser	3 R
Frequenza segnale radiofrequenza bipolare	1,5 Mhz
Valore aspirazione ritmata	Minore di 80 kPa (0,8 bar)

# T-SHAPE A **STRISCIA LA NOTIZIA**

in onda con il nostro Presidente **Antonio Baldan**,  
le Veline e il Gabibbo su **Canale 5**.



**B A L D A N**  
G R O U P

## ENTRA NELL'UNIVERSO BALDAN GROUP

PROFESSIONISTI DEL BENESSERE E DELL'ESTETICA DA OLTRE 40 ANNI

**8.000**

CLIENTI  
SODDISFATTI

**15**

PAESI ESTERI  
RAGGIUNTI

**60**

BEAUTY  
SPECIALIZZATE

**250**

AGENTI  
IN TUTTA EUROPA

Il Gabibbo, il marchio Striscia la Notizia e altri eventuali loghi Mediaset sono dei rispettivi proprietari.

# T-SHAPE **IN TV**

TUTTI I NUMERI DEL SUCCESSO MEDIATICO DI T-SHAPE  
DURANTE LA CAMPAGNA TV ANDATA IN ONDA  
A STRISCIA LA NOTIZIA DAL 5 AL 10 FEBBRAIO 2018.

INDICI DI  
SCOLTO

**47**  
**MILIONI**  
DI ITALIANI

CHECK UP  
PRENOTATI

**5.160**

E-MAIL  
RICEVUTE

**9.490**

VISITE AL  
SITO WEB

**5 MILIONI**

CONDIVISIONI  
SUI SOCIAL

**420.000**



**STRISCIA LA NOTIZIA**

Il Gabibbo, il marchio Striscia la Notizia e altri eventuali loghi Mediaset sono dei rispettivi proprietari.

# T-SHAPE

3 TECH LINE

BALDAN  
G R O U P

[www.baldangroup.com](http://www.baldangroup.com)

