

# Invacare® | **Dragon® Vertic**



## Tutto a portata di mano

Con *Invacare Dragon Vertic* l'altezza non è più un problema. Grazie al rivoluzionario telaio verticalizzabile, alzarsi in posizione eretta o raggiungere un oggetto prima inaccessibile diventa estremamente facile. Portarsi con regolarità e nella maniera più naturale ed autonoma in posizione verticale, oltre ad aumentare la propria indipendenza, apporta vantaggi terapeutici, miglioramenti al benessere fisico, alla circolazione sanguigna, alla tonicità muscolare, alle funzioni intestinali e contribuisce a prevenire e ridurre le piaghe da decubito. Ora, con *Dragon Vertic*, la distanza è un concetto relativo !!!



**Yes, you can.®**



### Spostarsi anche in posizione eretta

Invacare **Dragon Vertic** è il partner ideale nelle attività quotidiane in casa, al lavoro o durante il tempo libero. Alzarsi e spostarsi in completa autonomia e totale sicurezza ora è possibile, grazie al sistema combinato verticalizzatore mini ruote anteriori. La sicurezza è sempre al primo posto: la carrozzina è manovrabile anche in posizione eretta e la velocità è automaticamente ridotta, la ginocchiera a fascia sorregge gli arti inferiori ed una cintura di contenimento conferisce stabilità al tronco.

### Trasferimenti facilitati

Nulla è lasciato al caso: quando la carrozzina è nella posizione di massima verticalizzazione, le ruote anteriori poggiano direttamente al pavimento permettendo così i movimenti in qualsiasi direzione. La ginocchiera a fascia o in tubo metallico (optional) si sganciano indifferentemente a dx o sx e possono essere tolte quando non si utilizza la verticalizzazione.

### Una posizione confortevole

Comfort e regolazioni per una migliore e corretta postura:

- Sedile regolabile in larghezza e profondità
- Schienale tensionabile e inclinabile elettricamente
- Braccioli e poggiatesta regolabili in altezza

**Dragon Vertic** può essere corredata di vari accessori: poggiatesta, mini vassoio, sostegni per il tronco, poggiatesta imbottiti, fanaleria ed indicatori di direzione...

### Caratteristiche e optional




La compensazione in lunghezza dello schienale garantisce l'appoggio continuo del tronco durante la verticalizzazione.



Il bracciolo, solidale con lo schienale, si ribalta all'indietro per agevolare i trasferimenti.



Poggiatesta multiregolabile (optional) per un maggiore sostegno al capo.

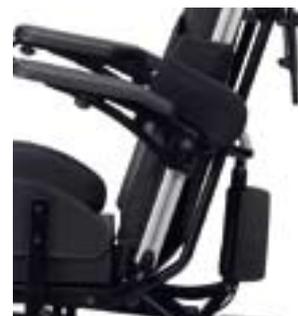

Schienale inclinabile elettricamente di serie: maggior comfort sia nella posizione seduta che in quella eretta.

**Caratteristiche e optional**



Supporti per le anche regolabili in larghezza, altezza ed estraibili.



Pratico mini vassoio ribaltabile verso il basso (optional).



Pedane poggiapiedi in alluminio regolabili in altezza, ribaltabili ed inclinabili.



Ruote posteriori piene antiforatura (optional)



Mini ruote anteriori consentono gli spostamenti della carrozzina anche quando ci si trova nella posizione eretta.



Ginocchiera in tubo (optional). Dotata di cuscinetti imbottiti, multiregolabili. Girevole a dx/sx o estraibile. Di serie ginocchiera a fascia.



**« Shark II »**  
Comando con integrata funzione di controllo velocità attuatori (verticalizzazione + inclinazione schienale).



**Sistema luci e frecce (optional)**  
Fanaleria anteriore e posteriore, indicatori di direzione intermittenti e luci di emergenza attivabili tramite comando **Shark II**.

## Dati tecnici



**Dragon Vertic** 385 - 420 mm<sup>1</sup>  
420 - 460 mm<sup>1</sup>



380 - 460 mm  
420 - 500 mm



500 / 550 mm



600 / 650 mm



260 - 350 mm



310 - 450 mm



1670 / 1720 mm



**Dragon Vertic**

6° - 22°



625 mm



1160 / 1210 mm



1050 mm<sup>3</sup>



850 mm



131 kg



100 kg



**Dragon Vertic**

2 x 60 Ah



1660 mm



40 mm



17,6% (10°)



2 x 180 W



25 km<sup>4</sup>



6 km/h

- 1/ Base seduta 450 mm, cuscino da 430 mm  
2/ seduta 630 mm  
3/ inclusi poggiatesta e antiribaltamento  
4/ secondo ISO 7176-4:2008


Il sistema di verticalizzazione è da prescrivere dietro precisa indicazione medica. Inizialmente è suggeribile l'aiuto di un fisioterapista che istruisca l'utente sul corretto utilizzo dell'ausilio.

## Colore telaio



Blu metallico

## Tipo/Colore fodere

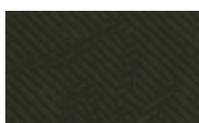

Nylon/Nero

**Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006 (uso interno) o 12.21.27.009 (uso esterno con luci)**  
+ 12.24.03.157 + 12.24.06.160 (solo uso interno) + 12.24.06.163 + /172 + /175 + codici ISO aggiuntivi  
**Nr. Repertorio DM: 95410/R**

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.

**PRODOTTO COMMERCIALIZZATO**